
ENERGI OCH INFORMATION ANORDNING

BioTrEM Universal

ANVÄNDARMANUAL

CE

Infört den 20 november 2024

TALLINN

2024

EU DECLARATION OF CONFORMITY



Tillverkarens namn:	Triomed EU OU (Ltd)
ID-code:	No. 12146269
Adress	4/2, Maealuse st., EE-12618 Tallinn, Estonia
Telefon:	+(372)56888978
e-post:	triomed.eesti@gmail.com

Härmed försäkrar Triomed EU OU (Ltd) under eget ansvar att följande produkt:

Energi- och informationsenhet BioTrEM Universal (med två (2) integrerade sändare, alternativ: 40-43 GHz)

överensstämmer med bestämmelserna i följande EG-direktiv, inklusive alla ändringar, och med nationell lagstiftning som genomför dessa direktiv:

Direktiv 2014/30/EU - Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Direktiv 2011/65/EU, inkl. ändring 2018/86/EU - ROHS 2- direktiv
Direktiv 2012/19/EU - WEEE 2-direktiv
Direktiv 2009/125/EU - Ekodesigndirektivet,

På grundval av direktiv 2014/30/EU kommer enheten och dess förpackning att CE-märkas.

Observera: denna DoC är en förkortad version.

Fullständigt dokument kan erhållas från tillverkare eller distributör.

Behörig firmatecknare:

Sergey Pichchev
COO för Triomed EU OU (Ltd)

Datum och plats
för utfärdande: 20
november 2024 Tallinn, ESTLAND

ANSVARFRISKRIVNING (utdrag)

"Kära konsument!

Tack för att du inkluderar BioTrEM Universal från Triomed EU LTD i ditt program för att upprätthålla en säker folkhälsa. Läs alltid igenom bruksanvisningen noggrant innan du använder BioTrEM Universal.

Du känner till och förstår tillverkarens uppgifter om att BioTrEM Universal inte är en medicinteknisk produkt. Den är därför inte avsedd för behandling eller diagnos av någon sjukdom.

Denna enhet har utformats för att bidra till att upprätthålla människors välbefinnande och informationen som tillhandahålls av Triomed EU LTD är endast avsedd att användas som en del av användarens personliga förbättringsprogram. Ingen av de uppgifter som lämnas är avsedda att användas som ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling."



Denna bruksanvisning är avsedd att göra dig förtrogen med korrekt och effektiv användning av BioTrEM Universal-apparaten i ditt dagliga liv. Enheten tillverkas av tillverkaren redo för användning och får endast användas av dig för avsett

ändamål och om du följer alla användningsregler.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och följ alla anvisningar. Detta kommer att hjälpa dig att uppnå hög effektivitet och förlänga produktens livslängd. Kom ihåg att vid felaktig användning av enheten förlorar du din rätt till reklamation och risken för eventuella konsekvenser är helt och hållet användarens ansvar.

Efter tillverkningen inspekteras enheten noggrant för att säkerställa korrekt funktion, rengörs och dekontamineras med desinfektionsmedlet "Aerodesin® 2000".

Detta dokument får inte ändras utan föregående godkännande från TRIOMED EU Ltd. Senast uppdaterad den 20.11.2024

FÖLJANDE TECKEN HAR ANVÄNTS I BRUKSANVISNINGEN OCH FÖR MÄRKNING AV ENHETEN:



CE-märkning.



Se användarhandboken



Icke-joniserande elektromagnetisk strålning.



Ömtålig, hantera med försiktighet!



Ej för allmänt avfall (hushållsavfall)



Varning, se det medföljande dokumentet



Viktig information om enheten eller dess hantering



Turns on/off (press-press)



Förvaras åtskilt från fukt!



Point of contact between the device and the body

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	6
1. MEKANISMER FÖR EXPONERINGSEFFEKTER	6
2. ENHETENS SYFTE	10
3. UTFORMNING OCH DRIFT	11
4. EN BESKRIVNING AV PROGRAMMEN OCH DERAS EFFEKTER	13
5. REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV BIOTREM UNIVERSAL	19
6. TEKNISKA OCH OPERATIVA EGENSKAPER	21
6.1. Allmänna tekniska egenskaper	21
6.2. Begränsningar i driften	22
6.3. Säkerhetsåtgärder	23
6.4. Förbereda enheten för drift	23
6.5. Lista över möjliga funktionsfel och metoder av deras eliminering.	24
6.6. Underhåll	25
7. KOMPLETT	25
8. FÖRPACKNING	25
9. ANVÄNDNING	26
10. GARANTIÅTAGANDEN	26

INLEDNING

En människas hälsa beror till stor del på hur väl anpassad hon är till sin omgivning".

Människan och omgivningen, som samverkar med varandra, utbyter ständigt energi, information och materia. Balansen mellan dessa metaboliska processer avgör i hög grad hälsotillståndet.

En kropp i naturlig balans och harmoni har en hög grad av motståndskraft, anpassningsförmåga och överlevnad i dagens moderna, snabbt föränderliga värld.

1. EXPONERINGSMEKANISMER EFFEKTER

FFrån födseln har en organism stor förmåga att återhämta sig från olika störningar".

Med åldrande och ackumulering av störningar, efter sjukdomar, minskar denna potential, bland annat på grund av fel i organismens kontrollsystem. Möjligheten att normalisera arbetet i organismens kontrollsystem med hjälp av informativa MM- signaler gör det möjligt att återställa eller avsevärt öka organismens potential för korrigerig av störningar.

Vid studier av biologiska objekt har det visat sig att en levande cell är en källa (generator) för elektromagnetiska vågor i millimeterområdet (MM) (från 1 till 10 mm) med extremt hög frekvens (EHF) - från 30 till 300 GHz. Biologiska objekt är den enda

naturliga källan till millimetervågor på jorden.

Som ett resultat av många års forskning har forskare funnit att cellmembran vibrerar i millimeterområdet. Det är vid denna våglängd som den samordnade kontrollen av kroppens celler och organ realiserar. MM-signaler genereras av cellmembranen, och dessa signaler styr - påskyndar vissa biokemiska reaktioner, förändrar enzymatisk aktivitet, stärker eller försvagar intercellulära förbindelser. Cellerna i en levande organism producerar själva MM-signaler för att återställa organiska och funktionella störningar eller för att anpassa sig till förändrade existensvillkor. Varje funktionsstörning motsvaras av att cellerna i organismen genererar MM-signaler vid sina egna frekvenser (vanligtvis kallade resonans), vilket bidrar till att eliminera störningarna.

Till följd av sjukdomar eller ålder störs produktionen av sådana signaler i kroppen. Men om du skickar vibrationer som sammanfaller med dess naturliga frekvens till cellen med hjälp av en enhet, återställs den.

Dessutom har mikrobiologer funnit att millimetervågor med speciellt utvald spektral sammansättning kan undertrycka patogena bakterier och virus.

Det speciella med millimetervågor är att de endast uppnår önskade effekter om de är i resonans med kroppscellernas vibrationer. Vid användning av MM- enheter från de första generationerna krävdes därför ett mycket exakt val av strålningsfrekvenser av erfarna specialister.

Företaget TRIOMED har skapat en millimetervågsgenerator

- bioparametrisk emitter - emitter med en biologiskt känsligt element, som är en funktionell elektromagnetisk analog av en levande cell.

Denna teknik kallas BioTrEM - biologiskt kontrollerad elektromagnetisk signaltransduktion.

BioTrEM-generatoren har mycket viktiga egenskaper som skiljer den från alla andra generatorer i MM (EHF)-området.

För det första, tack vare konstruktionen med öppen oscillerande krets och ultrahög känslighet i intervallet 30-500 GHz, är generatoren mycket exakt inställd på de elektromagnetiska emissionerna från kroppens celler och återutsänder dem i enlighet med dess algoritmer. Det innebär att BioTrEM-generatoren kan anpassa sig till en specifik organism varje ögonblick i realtid och avge exakt de vågor som den skadade cellen behöver just då för att hjälpa den att återhämta sig.

För det andra gör användningen av den senaste generationens halvledare av kisel-germanium med flera komponenter det möjligt att uppnå supermobilitet för elektrisk laddning och "minnes"-effekten - "inspelnings"-effekten. I det ögonblick då generatoren BioTrEM kopplas bort från den externa spänningen registrerar den på SiGe-kristallen alla omgivande dominerande elektromagnetiska fält i millimeterområdet och börjar sedan avge dem till den yttre miljön med låg intensitet i bakgrundsläget.

På så sätt skapas en informationskopia av det objekt som

sändaren interagerade med på sändaren. Detta gör det möjligt att utnyttja effekten av bakgrundsstrålningen och "överföra" information eller återföra information tillbaka till den biologiskt aktiva zonen

Dessutom gjorde användningen av BioTrEM-generatoren det för första gången möjligt att skapa enheter som genererar MM-vågor inte bara för kontakt utan också för fjärrpåverkan (på avstånd) på en levande organism.

BioTrEM-tekniken är en toppmodern teknik som använder frekvenser för friska celler, konstant personlig inställning och bio-feedback i realtid.

Alla BioTrEM-apparater kan avge och återge elektromagnetisk strålning på millimetervågsnivå, med hänsyn tagen till den dominerande inneboende strålningen i cellerna i de vävnader där apparaten för närvarande är placerad.

BioTrEM-influens justerar organismens arbete på alla nivåer, från celler till vävnader, organ, system och organismen som helhet. Människokroppen reagerar på millimetervågor som en helhet, inklusive alla länkar för reglering av fysiologiska processer.

2. ENHETENS SYFTE

BioTrEM Universal-apparaten är utformad för att skydda och återställa människors hälsa genom exponering för en speciellt utvald vågsignal i MM-området.

BioTrEM Universal-enheten är multifunktionell och kan användas för:

- harmonisering av det mänskliga energiinformationssystemet,
- för att upprätta en energibalans,
- för att återställa den allmänna kroppsregleringen,
- Ökad anpassningsförmåga,
- optimering av immunförsvaret och hormonsystemet,
- för att förebygga stressiga situationer,
- av de effekter som orsakas av stress,
- för att öka kroppens vitala resurser,
- av biologisk åldersreduktion,
- strukturering av vatten och vattenhaltiga medier,
- skapa informationskopior av objekt.

Enheten kännetecknas av enkel drift, enkelt och billigt underhåll, säkerhet, tillförlitlighet, låg vikt, rekommenderas för daglig oberoende användning i hushållsförhållanden för att öka vitala resurser, förbättra hälsan och det psyko- emotionella klimatet.

3. DESIGN OCH DRIFT

BioTrEM Universal-enheten är utformad som ett monoblock med tre inbyggda genereringsenheter - en IR-emitter och två millimetervågsgeneratorer BioTrEM.

På apparatusets frontpanel (fig. 1) finns en manöverknapp och 4 LED-indikatorer

På apparatusets baksida (fig. 2) finns två fästskruvar, IR-generatorn och arbetsplattformen, under vilken BioTrEM-generatorn är placerad.

Apparatens utseende och dess designelement visas i figurerna 1 och 2.

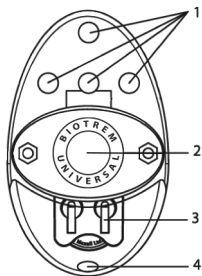


Bild 1. Frontpanel:
1- LED-indikatorer; 2- Kontrollknapp; 3 - Batterihållare; 4 - Fästning med rem.

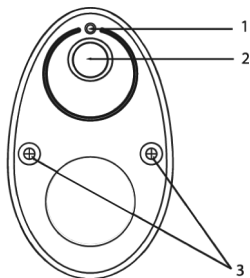


Bild 2. Bakre panelen:
1- IR-sändare; 2- EMP:s placeringgeneratorer; 3 - Fästskruvar.

När man trycker på manöverknappen slås apparaten på och program nr 1 ställs in. När knappen hålls intryckt växlar apparaten växelvis till olika driftsprogram, vilket visas genom att lysdioderna tänds i olika kombinationer under ca 2 sekunder (bild 3-6). Om man håller manöverknappen intryckt upprepas programomkopplingscykeln. När knappen släpps medan det önskade programmet visas, fortsätter enheten att utföra det.



Bild 3. Program 1



Bild 4. Program 2



Bild 5. Program 3



Fig. 6. Program 4

För att bekräfta att apparaten arbetar enligt det valda programmet tänds motsvarande LED-lampor med jämna mellanrum (efter 3÷4 sek.) en kort stund (fig. 3-6).

När det valda programmet är avslutat stängs apparaten av automatiskt. Apparaten kan när som helst stängas av i förtid genom att trycka på kontrollknappen igen.

4.EN BESKRIVNING AV PROGRAMMEN OCH DERAS EFFEKTER

Program #1 HARMONY. Arbetstiden är 30 minuter.



De viktigaste effekterna är ökad anpassningsförmåga, stärkt immunförsvar och antistresseffekter.

Genom att använda Harmony-programmet kan man minska de negativa effekterna av elektromagnetisk strålning som orsakas av människan och andra negativa miljöfaktorer, t.ex. stressiga situationer och vistelse i stora grupper.

Programmet förbättrar kroppens anpassningsförmåga till negativ yttre påverkan, ökar det ospecifika immunförsvaret, förebygger kronisk stress, ökar arbetsförmågan och stresståligheten, minskar tröttheten och främjar en bättre ömnkvalitet.

Apparaten kan användas inom ramen för detta program i ett team, oavsett deltagarnas ålder och hälsostatus. En viktig aspekt är att allas hälsa förbättras gradvis och försiktigt när den används, med hänsyn till organismens individuella egenskaper. När anpassningen är klar får kroppen tillräckliga resurser för att motstå aggressiva yttre faktorer (både smittsamma och icke smittsamma). När programmet Harmony tillämpas på personer med god hälsa bidrar det till att öka hälsoreserverna och öka motståndskraften mot olika negativa yttre påverkan.

Hur man använder programmet.

- Enheten placeras på ett avstånd av 30-50 cm från kroppen.
- Programmet Harmony rekommenderas för daglig användning (30 minuter 1-2 gånger om dagen beroende på kroppens kondition).
- Med Harmony-programmet är det möjligt att strukturera vatten och vattenhaltiga medier (inklusive livsmedel). För detta ändamål är det nödvändigt att påverka vatten vid rumstemperatur i 1 minut genom glas eller matfilm. Tjockleken på kärlväggen bör inte överstiga 2-4 millimeter.
- Det rekommenderas att man dricker några klunkar av det behandlade vattnet på en gång, utan mellanliggande transfusioner eller förvaring.

Program #2 HOMEOPATI. Arbetstiden är 15 minuter.

TBioTrEM-generatorens informationsignal hjälper till att automatiskt känna igen problemet och utlöser adekvata reaktioner hos bioobjektet för att lösa problemet.

Effektiviteten hos programmet Homeopati baseras på effekten av att "registrera" frekvensspektrumet från ett biologiskt objekt (kroppsområde som sändaren appliceras på) och dess vidare återstrålning i lågeffektläge. Denna strålningsmetod kallas bakgrundsresonansstrålning. Under

15 minuters arbete med programmet Homeopati "inspelning" från den problematiska platsen eller organet och dess återstrålning utförs många gånger.

Bakgrundsstrålning bidrar till organismens effektiva kamp mot främmande ämnen. Informationssignalen hjälper organismen att känna igen problemet och utlöser adekvata biologiska reaktioner hos bioobjektet som syftar till att lösa detta problem, vilket resulterar i att den vitala aktiviteten hos virus, bakterier, svampar och skadade celler undertrycks.

Vid användning av homeopatiprogrammet är det nödvändigt att föra apparaten så nära det valda området som möjligt med fönstret och först därefter slå på programmet. När programmet har avslutats kan apparaten lämnas kvar på det valda området under en tid.

Homeopatiprogrammet låter dig registrera information från ett biologiskt objekt eller ämne på enhetens emitter, för att skapa dess elektromagnetiska kopia. För att göra detta är det nödvändigt att applicera enhetens sändare på det nödvändiga objektet, slå på Homeopati-programmet i 15 sekunder, stänga av enheten och först sedan ta bort den. Denna "post" kan "överföras", till exempel till vatten.

Program #3 OPTIMA. Arbetstiden är 10 minuter.



Optima-programmet ger optimal balans med celler, organ, system och vävnader genom MM-generatoren, ett mjukt magnetfält och en infraröd emitter som förstärker effekten av millimetervågor.

Programmet Optima är utformat för att optimera tillståndet i immun- och hormonsystemen. Programmets åtgärder syftar också till normalisering av högre regleringscentra, för utan effektiv reglering (tydlig interaktion mellan organ och system) är det svårt att hantera kroniska sjukdomar.

Optima-programmet förbättrar mikrocirkulationen - blodflödet i små kärl (kapillärer) och främjar effektiviteten i hela andningskedjan (inklusive hemoglobin, enzymer, gasutbyte i lungorna och syreutnyttjande, ATP-syntes). Som ett resultat förbättras syretillförseln till cellerna, vilket i sin tur har en positiv effekt på kroppens energiförsörjning, eftersom syre spelar en nyckelroll i energimetabolismen.

Programmet Optima har en antioxidativ effekt som aktiverar kroppens försvar och minskar bildandet av fria radikaler. Detta minskar risken för att utveckla ett antal sjukdomar, att de övergår i kronisk form och att kroppen åldras i förtid.

Hur man använder programmet.

Vi rekommenderar att du applicerar apparaten på speciella zoner och akupunkturpunkter (se bilder), 1-2 zoner per dag, omväxlande, 10 min per zonen. Optima-programmet tillämpas i omgångar om 2 veckor och upprepas sedan efter 2 månader.

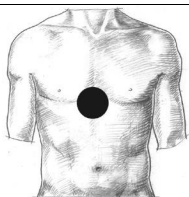


Bild 7.

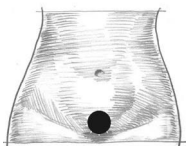


Bild 8.



Bild 9.



Bild 10.



Bild 11.

Systemiska effekter av exponering har en långvarig karaktär. I början manifesteras endast den primära positiva effekten, som byggs upp under 2-3 veckor efter exponeringsförloppet.

Därför bör man göra uppehåll på 2-3 månader mellan kurserna.

Program # 4 FÖRYNGRING. Arbetstiden 6 minuter.



Rejuvenation-programmet är unikt genom att det aktiverar kroppens celler, inklusive stamceller som förlorar sin aktivitet med åldern. Det är känt att störningar i cellfunktioner i kroppen leder till förändringar i frekvensen spektrum av dessa celler, och återställandet av dessa frekvenser bidrar till återkomsten av funktionerna hos cellerna själva. Den "Föryngring" programmet främjar restaurering och föryngring av organismen.

Hur man använder programmet.

- Apparaten appliceras på mitten av sternum under 6 minuter. Efter avslutad behandling ska apparaten lämnas kvar på detta område för bakgrundsbehandling under en timme. Daglig användning är möjlig.

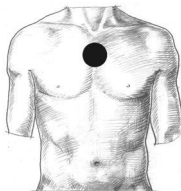


Bild 12.

5. REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING AV BIOTREM UNIVERSAL

Enhetens applikationsplats kan vara:

- patologiskt fokus eller dess projektionsområde,
- organ- och systemöverensstämmelsezoner
- området för ryggraden, lederna och de stora kärlen.
- 3 områden med maximal ömhet.
- Biologiskt aktiva zoner och punkter
- Området kring struma (trumhinnan). Detta område ger effekterna av produktiv lugnande (känsla av fullhet av styrka).

Om du inte följer kursmetoderna rekommenderas att du fokuserar på de områden där smärtan är som störst eller på de områden där problemet har förbättrats och de områden där BlotrEM överensstämmer när du väljer var du ska exponeras för sändaren.

I vilket fall som helst, varhelst påverkan utförs, insåg nästan alltid allmänna biologiska effekter: måttlig avgiftning, återställande av blodcirkulationen, återställande av neurohumoral reglering.

Användningen av BioTrEM-tekniken bör vara omfattande och utnyttja alla dess möjligheter:

- 1) MM-inflytande med hjälp av Optima- och Föryngringsprogrammen rekommenderas att påverka, på komplikationszonen, på den biologiskt aktiva zonen, på den biologiskt aktiva punkten, på projektionen av smärta, på platsen för problemet.

- 2) Bakgrundsbehandling av problemområdet med hjälp av Homeopathy-programmet.
- 3) Fjärrexponering med Harmony-programmet.
- 4) Förbrukning av strukturerat vatten. Det resulterande strukturerade vattnet med sina fysiska och kemiska parametrar ligger nära biologiska lösningar av levande celler i människokroppen. Det smälts väl av organismen utan överdriven energiförbrukning. Vattnet ska vara rumstempererat. Några klunkar av beredd strukturerad bör drickas omedelbart , utan transfusioner och lagring. Regelbunden användning av strukturerat vatten förbättrar cellmembranens arbete och saktar ner åldrandeprocesserna, ökar immuniteten, förbättrar ämnesomsättningen, rensar kroppen från toxiner och toxiner, ökar vitaliteten.
- 5) Informationsöverföring och applicering av vatten med information "inspelning". För att förbereda sådant vatten är det nödvändigt att spela in information från ett kroppsområde eller ämne i 15 sekunder, stänga av enheten och föra sändaren till väggen i ett glas med vatten i 1 minut. Några klunkar av det beredda vattnet bör drickas omedelbart.

Enheten BioTrEM Universal öppnar inre mänskliga resurser, ökar kroppens motståndskraft och hjälper till med återhämtningen!

6. TEKNISKA OCH OPERATIVA EGENSKAPER

6.1. Allmänna tekniska egenskaper

Enheten är tillverkad utan användning av kemikalier och material som är skadliga för människors hälsa och är tillverkad enligt den tekniska dokumentationen från Triomed EU OÜ (Ltd).

BioTrEM Universal-enheten är tillgänglig med två inbyggda generatorer för elektromagnetisk strålning på millimetervågsnivå (BioTrEM-generator #1 - bärfrekvens från 40 till 43 GHz, våglängd från

7,5 till 6,98 mm) och IR-emitter (våglängd från 1,2 till 0,8 µm).

Apparatens programvara gör det möjligt att skapa emissioner med olika modulering och energidistribution under drift. Enhetens design implementerar 4 program som beskrivs i avsnitt 4.

De viktigaste tekniska egenskaperna hos BioTrEM Universal-apparaten anges i tabell 1.

tabell 1

Nej	Egenskaper	Beskrivning
1	Automatisk avstängningsfunktion	efter programmets slut
2	Övergripande mått	inte mer än 75×45×13 mm
3	Vikt	inte mer än 0,1 kg
4	Enhetens livscykel	inte mindre än 5 år
5	Lufttemperatur under drift	+ 10 till + 35°C

6	Nominellt luftfuktighetsvärde (kombination av relativ luftfuktighet och temperatur)	80 % vid 25 °C
7	Nominell DC-spänning	3.0 V
8	Strömförbrukning	inte mer än 30 mA
9	Strömförbrukning	högst 100 mVA

Enheten levereras med ett CR2032-batteri.

Lågintensiv informationsenergistrålning moduleras av en enkel lågfrekvent eller komplex modulerad signal. Ändring av frekvens, varaktighet och form av modulerande signaler under drift utförs enligt originalprogram, vilket ger multimodalitet av påverkan som förbättrar effekten av applikationen.

Inga särskilda säkerhetsåtgärder krävs.

6.2. Drift begränsningar



Apparaten får endast användas efter att du har läst bruksanvisningen.

Det är förbjudet:



- använda enheten utan att läsa bruksanvisningen;
- använda en defekt eller skadad enhet;
- använd enheten i rum med hög luftfuktighet;
- Sänk ner enheten i vatten;
- tillåter vatten eller kemikalier att tränga in i enhet



- utsätta enheten för hårdhänt hantering, kraftig mekanisk påverkan, stötar, fall;



- förvara enheten på platser som är tillgängliga för barn och djur;;
- börja använda enheten efter att den har blivit förvaras vid temperaturer under 0°C tidigare än fyra (4) timmar efter det att den har förvarats oförpackad i rumstemperatur.

6.3. Säkerhet försiktighetsåtgärder



- inga särskilda säkerhetsåtgärder krävs i händelse av fel på enheten.

6.4. Förbereda enheten för drift

Innan du slår på apparaten ska du göra en yttre kontroll av apparaten och kontrollera att höljet inte är skadat. Använd INTE apparaten med ett skadat hölje!

- Ta en phillipsskruvmejsel och ta bort skruvarna;
- ta bort locket;
- ta ut batteriet ur batterihållaren;
- Sätt i ett nytt CR2032-batteri i batterihållaren, Observera polariteten;
- Sätt tillbaka locket och skruva fast det i basen.

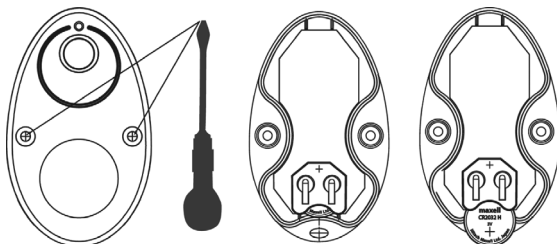


Bild 13. Byte av batteri

The battery charge level is determined by the brightness of the LEDs when the device is on.

Batteriets laddningsnivå bestäms av lysdiodernas ljusstyrka när enheten är påslagen.

Möjliga fel och förslag till åtgärder anges i tabell 2.

Tabell 2.			
Nej	Tecken på ett fel	Trolig orsak	Åtgärd
1	Lysdioderna tänds inte när man trycker på kontrollknappen	Batteriet är defekt eller urladdat	Byt ut batteriet; Om enheten inte slås på om du byter ut batteriet mot ett batteri som du vet fungerar, skicka in enheten för reparation
2	Enheten lämnar inte programvalsläget och stängs inte av	Fel i den elektriska kretsen	Skicka in enheten för reparation

3	Batteriet som är installerat i enheten laddas ur på korttid (mindre än en månad) vid icke-intensiv användning av enheten	Fel i den elektriska kretsen	Skicka in enheten för reparation
---	--	------------------------------	----------------------------------

Vid andra funktionsstörningar, kontakta din säljare

6.6. Underhåll

Det finns inget underhåll under enhetens livscykel.

7. KOMPLETT

Leveranspaketet innehåller:

- BioTrEM Universal-enhet;
- CR2032-batteri installerat i enheten;
- användarhandbok;
- konsumentförpackningar;
- tillverkarens garantiåtaganden

8. FÖRPACKNING

Enhetens förpackning ger skydd mot klimatiska och mekaniska faktorer. Förpackningen (lådan) innehåller all nödvändig information om produkten och tillverkaren, driftskyltar och symboler på engelska och/eller språket i säljarens land.

9. ANVÄNDNING



Apparaterna är tillverkade i enlighet med kraven i gällande EU-direktiv om innehållet av skadliga kemikalier i produkter. Apparaten måste kasseras i en behållare som är speciellt avsedd för radioelektronisk utrustning.

10. GARANTI SKYLDIGHETER

Tillverkarens garantianspråk anges på en separat flik som ligger i förpackningslådan.

© Triomed EU LTD, 2024

Alla rättigheter förbehållna
Tryckt i Estland