



Cellvital
Homecare




Quickguide

Schnell-Start-Anleitung Quick-start-instructions

// So trainiert man Seine Zellen Heute.
// This way you train your cells.

Anschlüsse / Connections /

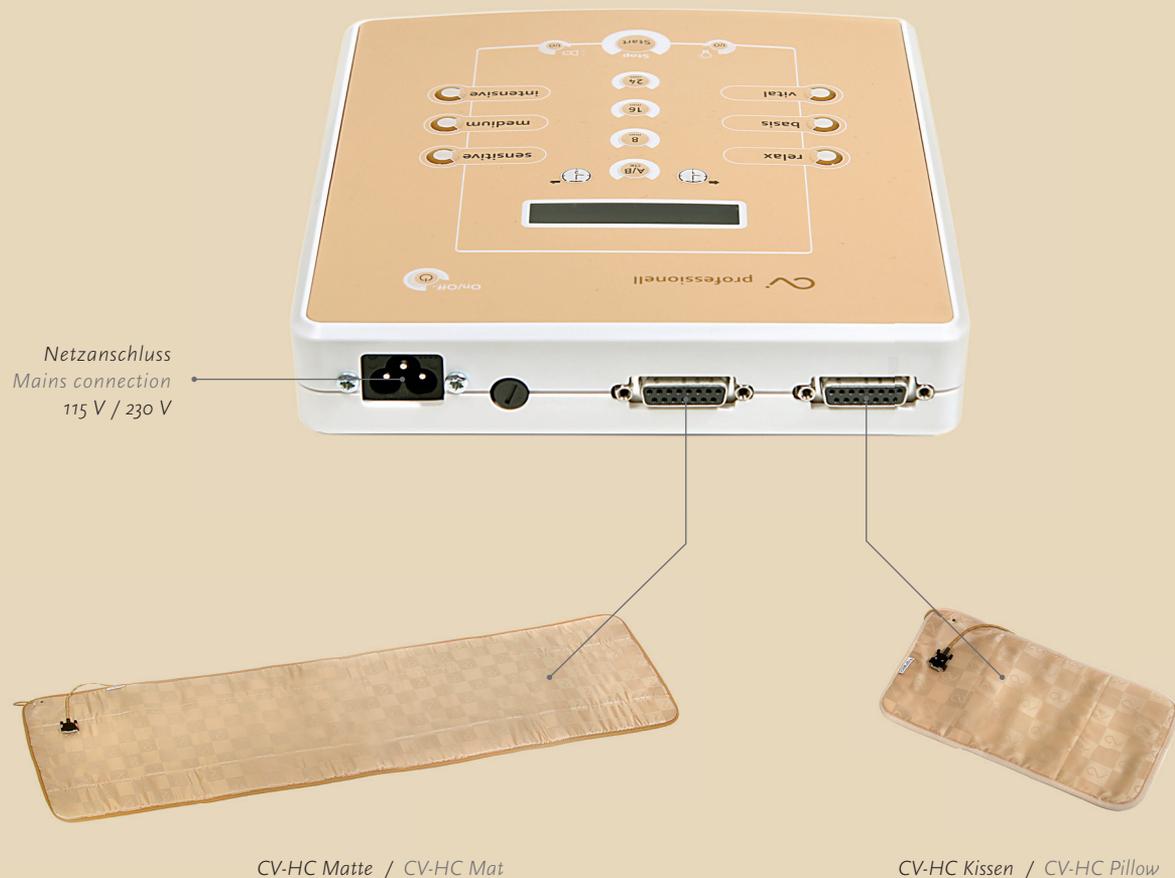

ANSCHLUSS DER APPLIKATOREN
CONNECTION OF THE APPLICATORS




CV-Homecare Gerät
Inbetriebnahme /

- a) Netzkabel ans Gerät und in die Steckdose stecken.
- b) Applikator anschließen (2 frei wählbare Applikatoren können gleichzeitig am Gerät angeschlossen werden).


CV-Homecare device
connecting /

- a) Plug in the power cable and connect the device to the mains.
- b) Connect the applicator (2 freely selectable applicators can be simultaneously connected to the device).

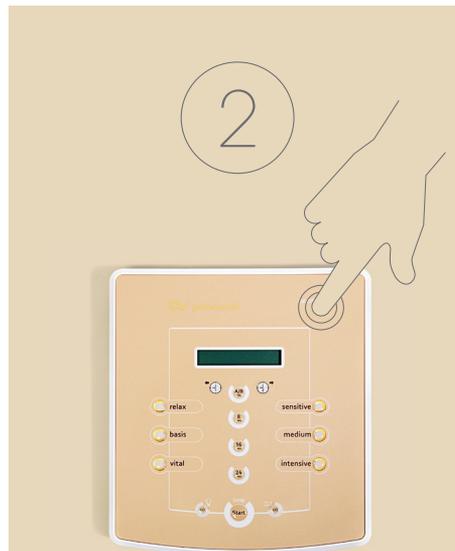

CV-Homecare Gerät
anschalten /
Taste „On/Off“ betätigen

CV-Homecare device
power /
Press the „On/Off“ button

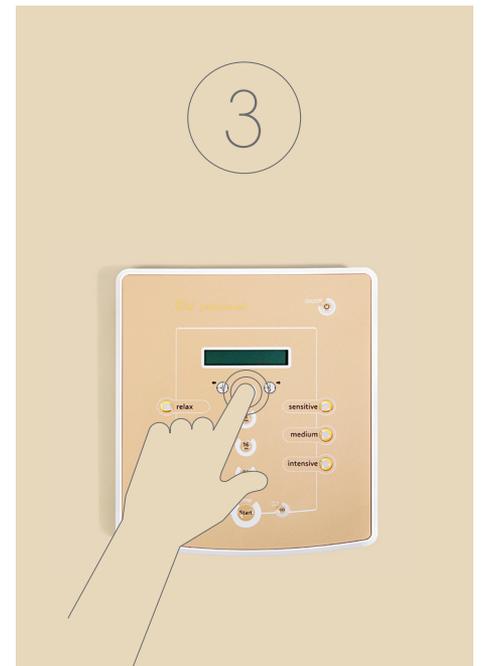

CV-Homecare Applikator
auswählen /
Mit der Betätigung der „A/B“
Taste, können sie den gewünsch-
ten Applikator auf dem Display
auswählen

CV-Homecare applicator
select /
Press the „A/B“ button, and
select the desired applicator
on the display.

4



CV-Homecare Programm auswählen /
Bitte die Taste des gewünschten Programmes auswählen „relax“, „basis“ oder „vital“. Nähere Informationen zu den Programmen sind in den beigefügten „CV-Homecare Einstellungs-empfehlungen“ zu finden.

CV-Homecare Program select /
Press the button of the desired program „relax“, „basic“ or „vital“. More information about the programs can be found in the „CV-Homecare setting recommendations“.

5



CV-Homecare Programm Intensität auswählen /
Bitte die Taste der gewünschten Intensität auswählen „sensitive“, „medium“ oder „intensive“. Nähere Informationen zur Intensität sind in den beigefügten „CV-Homecare Einstellungs-empfehlungen“ zu finden.

CV-Homecare Program intensity select /
Press the button of the desired intensity „sensitive“, „medium“ or „intensive“. More information, to intensity can be found in the „CV-Homecare setting recommendations“

6



CV-Homecare Anwendungsdauer auswählen /
Bitte die Taste der gewünschten Anwendungsdauer auswählen „8min“, „16min“ oder „24min“. Nähere Informationen, zur Anwendungsdauer sind in den beigefügten „CV-Homecare Einstellungsempfehlungen“ zu finden.

CV-Homecare application time /
Press the button of the desired application time „8min“, „16min“ or „24min“. More information, to duration of use can be found in the „CV-homecare setting recommendations“.

7



CV-Homocare Anwendung
Starten /
Mit der Betätigung der „Start“
Taste, kann die Anwendung
begonnen werden.

CV-Homocare application
start /
By pressing the „Start“ button,
the application can be started.



CV-HC-Bedienungsanleitung
CV-Homocare
instruction manual



TIPP: Sie können ihr CV-Homocare Gerät
noch einfacher und bequemer einstellen:
unser „Quick Guide Video“ steht Ihnen auf
www.cellvital-homocare.com/videos/quick-guide/
jederzeit zu Verfügung.


TIP: You can set your CV-Homocare device easier!
Scan the QS Code or visit our website
www.cellvital-homocare.com/videos/quick-guide/
and consult our „Quick Guide Video“.



CV-HC-Einstellungsbroschüre
CV-Homocare setting
recommendations



CV-HC-Einstellungsbroschüre-
Indikationen
CV-Homocare setting
recommendations

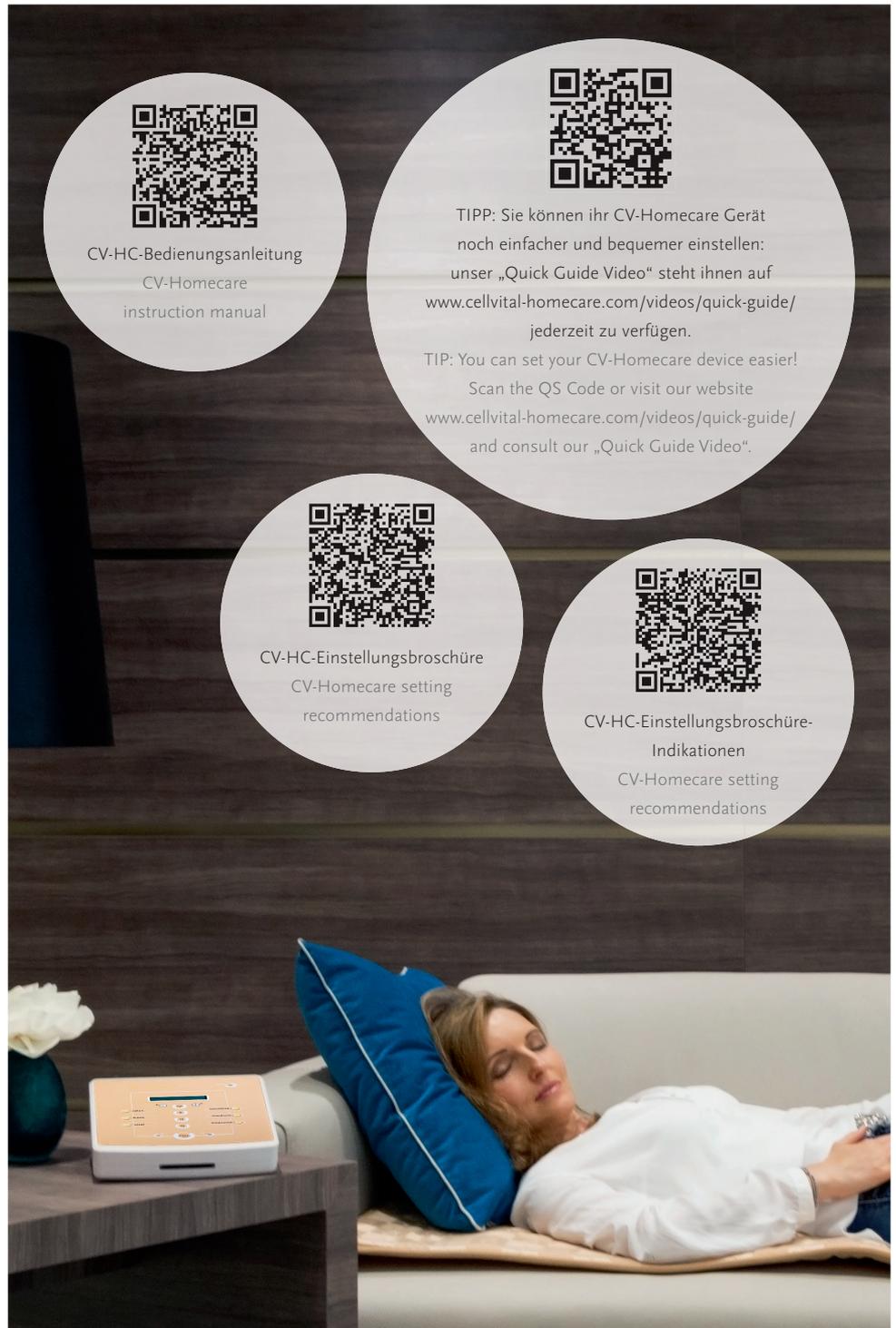

Weitere
Funktionen /
Further
functions /


Displaybeleuchtung /
Display light /



Die Beleuchtung des Displays
kann an- oder abgeschaltet
werden durch die Betätigung der
Lichttaste.

The illumination of the display
can be switched on or off by
pressing the light button.

Tonsignal /
Sound signal /

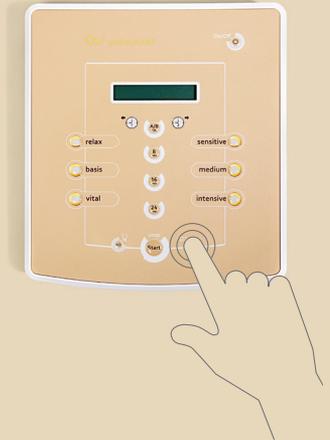

Ein Signalton nach Ablauf der
Therapiezeit kann an- oder aus-
geschaltet werden durch die
Betätigung der Lautsprechertaste.

Press the speaker button, to turn
on or off the beep signal after the
expiry of the treatment time.


Timer 1 /
Timer 1 /



Aktivierung der Timer-funktion: CV-Homecare-System verfügt über 2 vorprogrammierbare Timer. Die Therapie kann damit automatisch gestartet werden. Startzeit und Therapieparameter sind frei wählbar. Zur Aktivierung oder Deaktivierung Timer 1: die Feinsteuerung Taste 1 gedrückt halten und dabei das Gerät einschalten. Mehr Informationen gibt es auf Seite 21/22 auf der elektronischen Bedienungsanleitung der beigefügten CD.

How to activate the timer function:
the CV-homecare device has 2 pre-programmable timer, so that the therapy can be started automatically. Start time and therapy parameters are freely selectable. To activate or deactivate the timer 1, hold the fine-tuning button 1 while turning on the device. More informations are available on page 21/22 on the electronic manual on the attached CD.

Timer 2 /
Timer 2 /

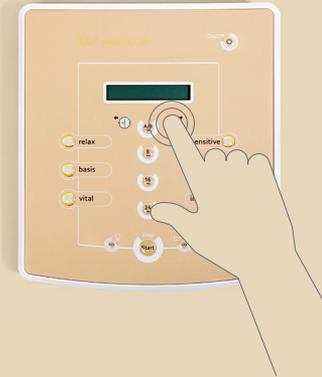

Zur Aktivierung oder Timer 2: die Feinsteuerung Taste 2 gedrückt halten und dabei das Gerät einschalten. Mehr Informationen gibt es auf Seite 21/22 auf der elektronischen Bedienungsanleitung der beigefügten CD.

To activate or deactivate the timer 2, hold the fine-tuning button 2 while turning on the device. More informations are available on page 21/22 on the electronic manual on the attached CD.

Scan the code, to contact us:



www.cellvital-homecare.com

CELLVITAL CLINICS AG / Brändlistrasse 1 / CH-9435 Heerbrugg / info@cellvital-homecare.com

CV-Homecare-Set /

- > CV-Homecare Steuergerät / CV-Homecare Control unit
- > CV-HC Matte / CV-HC Mat
- > CV-HC Kissen / CV-HC Pillow
- > Stromkabel / Power cable
- > Bedienungsanleitung (pdf) / User manual (pdf)